

## Ceramill Map 600+



### Le scanner intelligent dernière génération

Bienvenue dans la dernière génération DNA de scanner. Entièrement automatique, le Ceramill Map 600+ permet de scanner tous les modèles d'articulateurs. Laissez vous porter par son intelligence, son efficacité et sa haute précision avec la numérisation HD.

### Un accès à la haute performance en toute simplicité

Le Ceramill Map 600+ convainc par sa simplicité d'utilisation et sa plaque de support universelle intégrée pour tous les types d'articulateurs. Plus de changement de plaques et gain de temps assuré. Son boîtier ouvert étudié en fonction des recommandations dentaires pour faciliter son utilisation apporte confort et fluidité de travail.

Haute technologie ? Oui ! Le scanner Ceramill Map 600+ s'appuie sur un capteur 3D haute définition avec technologie à lumière bleue, une résolution variable et surtout une protection anti lumière pour des résultats optimaux !

### Une innovation pour un confort optimal

Le scanner Map 600+ permet de scanner des modèles en Haute définition montés directement sur l'articulateur sans transfert préalable. Pendant la numérisation, le modèle suit un transfert numérique avec conservation de la relation axiale de l'articulateur réel. Une simplicité innovante alliée à une efficacité et un confort optimal sans composant ni accessoire.



Numérisation  
HD



Gain de temps :  
18 sec pour une  
mâchoire complète




Précis :  
4  $\mu$ m



Innovant

## Données techniques

Axes: 3  
 Dimensions P/L/H: 415 x 424 x 469 mm  
 Poids: 25 kg  
 Connexions électriques: 100-240V/50/60 Hz  
 Fusibles: T 2 x 1,6A  
 Puissance: 60 W  
 Précision: 4  $\mu$ m  
 Précision réalisations implantaire: 10  $\mu$ m  
 Scan de la mâchoire complète : 18 secondes  
 Scan moignon unitaire avec Ceramill M-Die : 4,5 secondes

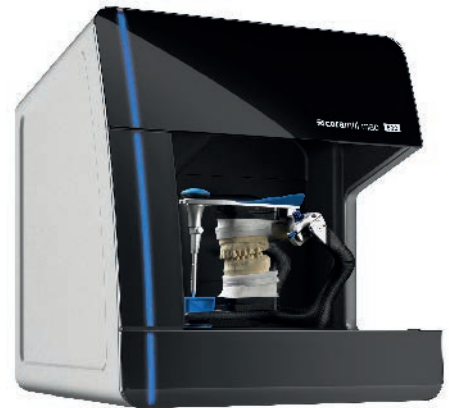

## Aperçu des fonctions

Scan d'empreinte  
 Scan de texture et de couleur  
 Multi Die intelligent – jusqu'à 12 moignons  
 Scan universel  
 All in  
 Autofocus



Scan empreinte



Scan universel



Multi die

## Un service Dental Inc

- Un SAV premium
- Une équipe disponible et à l'écoute
- Installation et formation sur place partout en France
- Accompagnement et formation régulières

